

Mediblink Električni nosni aspirator SuperEasy M405



Namen uporabe: Izdelek staršem pomaga hitro in nežno odstraniti odvečno nosno sluz iz otrokovega noska kar doma.

Čist nossek za lažje dihanje in mirnejši spanec

Redno čiščenje nosnih poti je pri dojenčkih in majhnih otrocih zelo pomembno, saj še ne znajo samostojno izpihati nosu. **Zamašen nos** lahko povzroči **oteženo dihanje**, **slabši spanec** in **težave pri hranjenju**, hkrati pa poveča tveganje za **vnetja ušes, oči in dihal**.

Aspiriranje pomeni nežno odstranjevanje odvečne nosne sluzi s pomočjo nosnega aspiratorja, s čimer otroku omogočimo **dihanje skozi nos** (ne skozi usta), **lažje hranjenje** (posebej pri dojenčkih, ki sesajo mleko in morajo medtem dihati skozi nos), **boljše spanje** (tako za otroka kot za starše), **hitrejše okrevanje ob prehladu**, manj odsotnosti z dela in manj skrbi za vso družino. Z redno in pravilno uporabo nosnega aspiratorja lahko **zmanjšamo zastajanje sluzi** (ki lahko predstavlja gojišče za bakterije), možnost **širjenja okužb na spodnja dihal** ter verjetnost za **vnetje srednjega ušesa** (otitis). Posledično je tudi verjetnost za jemanje antibiotikov veliko manjša.

Aspirator je zasnovan za varno in večkratno uporabo v domačem okolju, zato predstavlja nepogrešljiv pripomoček za vsakodnevno nego otrokovih dihalnih poti.

- **Čist otrokov nos** - lažje dihanje in hranjenje, boljši spanec ter zmanjšano tveganje za vnetja ušes, oči in dihal
- **Nastavljiva moč sesanja** – varna uporaba za osebe vseh starosti, od 1. meseca dalje
- **Bolj miren spanec** – sproščen otrok in naspani starši
- **Hitra in učinkovita rešitev** – prihranek časa in denarja

Idealna izbira za starše, ki želijo brezskrbno, varno in učinkovito nego otrokovih dihalnih poti.

Mediblink SuperEasy M405 je zasnovan kot zanesljiv dolgoročni pomočnik pri vsakodnevni skrbi za otrokovo dobro počutje.

Mediblink električni nosni aspirator SuperEasy M405 je zasnovan kot **vrhunski pripomoček**, ki združuje **izjemno učinkovitost, napredno tehnologijo, varnost in higieničnost uporabe** ter **možnost uporabe kjerkoli**.




Patentirana zaščita pred povratnim tokom



Mediblink SuperEasy M405 uporablja edinstveno **patentirano** zasnovo, ki **preprečuje povratni tok** tekočine in učinkovito zadržuje izsesano sluz v zbiralniku.

Globalni patent za preprečevanje povratnega toka zagotavlja **bolj higienično uporabo, večjo zaščito** notranjih komponent, **manj možnosti za poškodbe** naprave in **daljšo življenjsko dobo** izdelka, obenem pa **preprečuje neželeno prehajanje** tekočine v notranjost naprave ter zagotavlja **zanesljivo delovanje** tudi pri pogostejši uporabi.

Napredna Anti-Overflow tehnologija

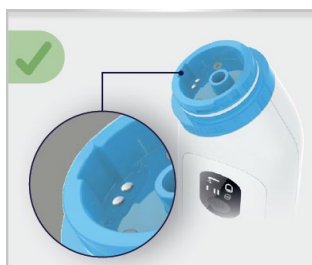

Zahvaljujoč **trem posodicam** in **posebnemu senzorju v zbiralniku** sluz **ne more preiti v notranjost naprave**, saj senzor zazna možnost preliivanja in poskrbi, da se naprava samodejno izklopi. S tem je napravi **zagotovljena zanesljiva in higienična uporaba** ter **daljša življenjska doba**, staršem in otrokom pa **odlična uporabniška izkušnja**.

Pri številnih nosnih aspiratorjih brez senzorja namreč te zaščite ni – sluz lahko hitro prodre v napravo, kar povzroči slabše delovanje, okvaro ali celo popolno uničenje naprave.

Tri nastavljive stopnje izsesavanja

Nosni aspirator omogoča **prilagoditev moči aspiriranja** glede na starost, občutljivost in trenutno stanje nosnih poti otroka (tudi večja sesalna moč je povsem varna). **Način AUTO** omogoča samodejno izsesavanje, **način I** nizko sesalno moč, **način II** pa visoko sesalno moč. Regulirana moč izsesavanja prepreči draženje in mikrokrvavitve v nosni votlini.

- **Način AUTO** uporablja pulzno sesalno tehnologijo (*Pulse Suction Technology*), ki uporablja inteligentni krmilni čip in hitro izmenjuje faze sesanja ter kratkih prekinitev, s čimer ustvarja enakomeren, valovit pretok zraka. To omogoča nežen, ritmični učinek, ki pomaga najprej **razrahljati sluz**, nato pa jo **učinkovito odstraniti** z minimalnim nelagodjem. Primeren je za večino uporabnikov in vsakodnevno uporabo. Še posebej je primeren za starejše dojenčke in mlajše otroke, pa tudi za uporabnike, ki želijo čim bolj optimalno izsesavanje.
- **Način I** se priporoča za mlajše dojenčke in malčke, za uporabnike z občutljivejšo nosno sluznico, v primeru redkejšje sluzi ali pri manj zamašenem nosu.
- **Način II** se priporoča za starejše otroke in odrasle, v primeru gostejše sluzi ali pri izrazito zamašenem nosu.

Zelo tiho delovanje

Naprava zagotavlja uporabo brez strahu in joka, saj je glasnost med delovanjem manjša od 60 dB. Otroka hrup ne prestraši, zato je postopek **hitrejši, nežnejši** in **manj stresen**.

Uporaba praktično kjerkoli

Aspirator je **prenosen**, kar pomeni, da ga lahko uporabljate **praktično kjerkoli**. Za napajanje uporablja 3 alkalne baterije AAA, ki so priložene. Zagotavlja nizko porabo energije (komplet baterij zdrži približno 70 uporab).

Uporaba brez filtrov

Aspirator **nima filtrov**, zato je skrb glede čistoče, nakupa in menjave filtrov, povsem odveč.

2 nosna nastavka različnih velikosti

Priložena sta **2 nastavka** iz mehkega silikona v **2 različnih velikostih** za nežno in varno izsesavanje.

Ozki nosni nastavek je primeren za mlajše dojenčke z ozkimi nosnicami ali v primeru gostejše sluzi. **Široki nosni nastavek** je primeren za starejše dojenčke in malčke, v primeru redkejšje sluzi ali pri večji količini sluzi.

Nastavka ne vsebujeta Bisfenola A (BPA). Uporabljeni so izključno materiali, ki so **popolnoma neškodljivi zdravju**.



Pregleden LED zaslon

LED zaslon prikaže **stopnjo izsesavanja, stopnjo napolnjenosti baterije** ter **poziv za čiščenje**. Ko se na zaslonu prikaže utripajoči simbol baterije, le-te zamenjajte s tremi novimi.

Za vsakodnevno uporabo

Je **majhen, priročen, varen, higieničen** ter **enostaven za uporabo in čiščenje**. Napravo lahko upravljamo prek enega gumba. Po 65 sekundah neuporabe se naprava samodejno izklopi.

3 leta garancije

3 leta brez skrbi. Zagotavljamo hiter servis ter odlično in ažurno podporo uporabnikom.

Vsebina

V kompletu prejmete 1 nosni aspirator, 2 nosna nastavka različnih velikosti iz mehkega silikona (1 širokega in 1 ozkega), 2 silikonska tesnilna obročka, 1 navodila za uporabo in 3 AAA alkalne baterije.

Čiščenje in razkuževanje

Priporočljivo je, da napravo očistite in razkužite po vsaki uporabi, da preprečite razmnoževanje bakterij in pojav okužb. Ohišja nikoli ne potaplajte v vodo in ga ne umivajte pod tekočo vodo.

Čiščenje

Nosna nastavka, prozoren pokrov in zbiralnik očistite s tekočo vodo, po potrebi lahko uporabite tudi nevtravno čistilo. **Površino ohišja** očistite z mehko krpo, ki ste jo prej navlažili s čisto vodo.

Razkuževanje

Zunanost izdelka razkužite tako, da ohišje obrišete z vato, namočeno v medicinski alkohol, ali mehko krpo, namočeno v 70- do 75-odstotni medicinski alkohol. **Nosna nastavka, prozoren pokrov in zbiralnik** razkužite tako, da jih za 2-3 minute potopite v vrelo vodo s temperaturo od 99 °C do 100 °C.